



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

CoaguChek Pro II



Analyse	Probe	Modus
INR	G02	Patiententest (Bild 1)
aPTT	G09	Patiententest (Bild 1)



Den gesamten Inhalt der Lösung in das Lyophilisat-Fläschchen geben und mischen.

Die Probe G02 muss nach dem Mischen 5 Minuten stehengelassen werden und ist maximal 30 Minuten stabile.

Die Probe G09 kann sofort nach dem Mischen gemessen werden und ist danach für weitere 5 Minuten stabil.

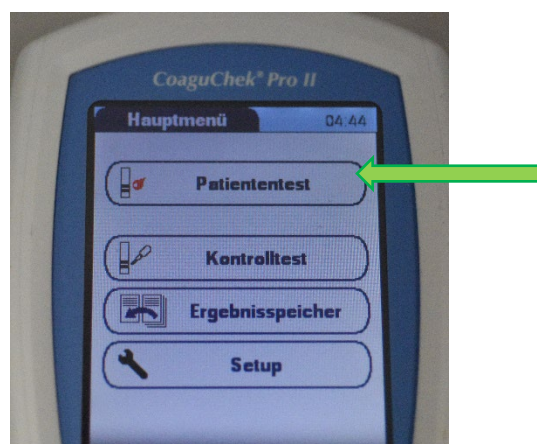


Bild 1: Modus Patiententest